

車いすクッション

FC-クッションシリーズ





FC-CUSHION
series



弊社 Web サイトでは、
ポジショニングや姿勢づくりを
詳しくご紹介しています

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索

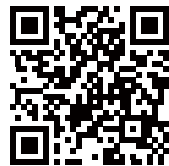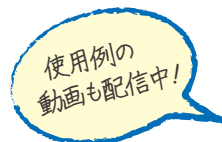

アイ・ソネックス株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

FC-CUSHION

Seating 快適に座る

起きている時間のうち、
座って活動する時間はとても大切。
食べたり、くつろいだり、移動したり、
時には車椅子を足で漕いだり。
様々な生活シーンで動きやすく、
快適に座れるようなクッションを
作りました。



「りはとけあ」とは、わたしたちが、アイ・ソネックスの
プロダクト全体を通して提案する、新しい介護のカタチです。
「気持ちよく眠る」、「立ち上がる」、「快適に座る」、
「美味しく食べる」、「スッキリ出す」という5つの活動が
プロダクトによってより良く変化することで、生活の
好循環が回り出す、そんな介護スタイルの提供を
目指しています。

「姿勢保持力」から見た背クッションの選び方

強

体幹や腰をしっかり支えないと
座位姿勢が保てない方に

FC-フィット(背)



P.7 掲載

通常の背クッションでは支えきれない方
でも超ロングタイプのパットがしっかり
届いて保持

FC-フィット(腰)



P.7 掲載

車いす背シートと骨盤の間の
隙間を埋めて骨盤後傾を防止

弱

腰痛などで支えがあると座位が
楽に続けられる方に



FC-ファイン 背クッション ロングタイプ

P.5 掲載

置くだけで体幹や骨盤にフィット
するので面倒な背張り調整が不要



FC-ファイン 背クッション ショートタイプ

P.5 掲載

骨盤サポート付の車いすや
食卓椅子などに適合

「床ずれリスク」から見た 座クッションの選び方

高

積極的に床ずれを防止したい方に

FC-コキュー君NV もも着脱タイプ



P.3 掲載

ももパットを外すとクッションの
前座が低くなるので足こぎに最適

FC-コキュー君NV フラットタイプ



P.3 掲載

フラットなので乗り降りしやすい

中

座位時間が長くて姿勢が崩れる方に

FC-ファイン 座クッション



P.6 掲載

ハイタイプ

ロータイプ

ジャバラスリットの働きで前滑りにくい

エルダー-クッション



P.8 掲載

立体構造が前すべりを防いで良い姿勢に

低

座位の安定と動きやすさの
両方を求める方に

ゲルファースト



P.8 掲載

皮膚への摩擦やずれの力を吸収

置き間違い防止
「前 (ひざ側)」表示タグ付!



座クッション 機能性アイコン

■クッションの形状



フラットタイプ



乗り降りしやすい

凹凸がないので車い
すへの乗り降りがし
やすいタイプです。



コンタータイプ



床ずれ防止+姿勢保持

臀部に沿う形状で
体圧分散性と姿勢保
持性を兼ね備えてい
ます。




もも着脱タイプ



足こぎ対応

ももパットを取り外す
と前座面が低くなり
足こぎがしやすくな
ります。

■クッション底面の形状

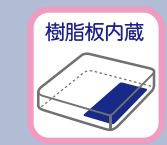

樹脂板内蔵タイプ

滑りすわりなどで車いす座面が短く
なる方に。車いす座面より前出し
しても樹脂板によりクッションが
変形せず、大腿を支えます。

床ずれ対策にベスト！目玉バルブの自動調圧エアクッション



もも着脱タイプ
40cm 幅
¥35,200
(税別 32,000 円)




足こぎ対応！もも着脱タイプ



フラットタイプ
38cm 幅 / 40cm 幅
¥30,800
(税別 28,000 円)



乗り降りしやすい！フラットタイプ

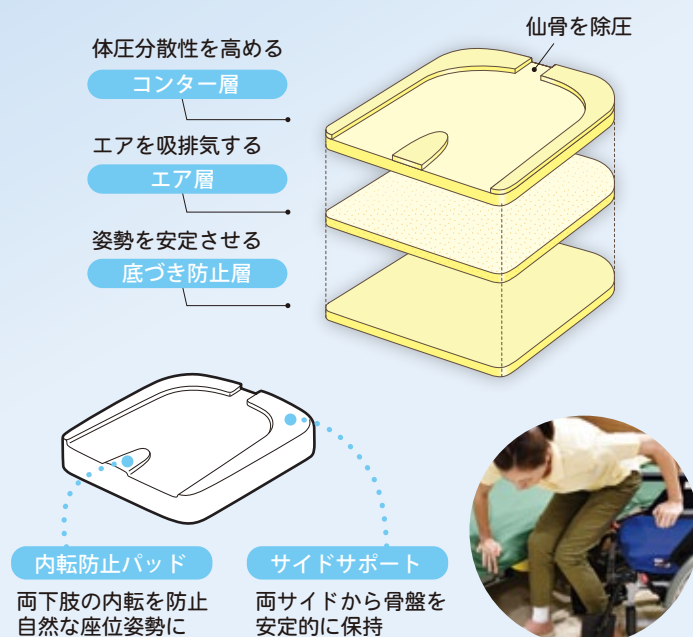

おすすめ対象者



- ・座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- ・姿勢の崩れや前滑りを防止したい方
- ・片麻痺で足こぎをされる方
- ・股関節を深く屈曲できない方(大腿骨頸部骨折後、関節リウマチなど)

おすすめ対象者



- ・座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- ・失禁や失便が多く、汚れが気になる方
- ・長時間車いすに座って過ごされる方
- ・車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

目玉バルブで吸排気を自動コントロール

座ると自動的に空気を排気してお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

体動に合わせてエアを素早く吸排気するので長時間座っても疲れにくいクッションです。



バルブのリリース機能でどすんと座っても安心


勢いよく座った時にはエアを一気に排出。着座時の衝撃や痛みを緩和し、急激な内圧上昇によるパンクも防ぎます。

▼エアを一気に排出する「リリース機能」




エアとウレタンのハイブリッド構造、体圧分散+姿勢保持を両立

エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら座位姿勢の安定性を高めます。

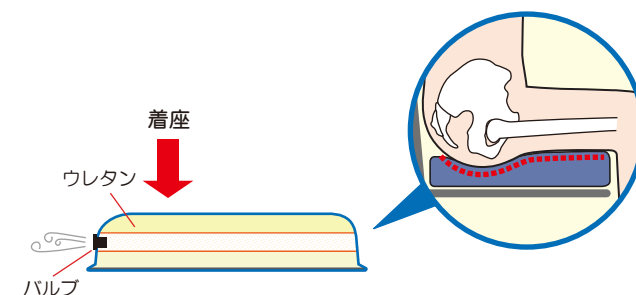

ひとつのバルブで幅広い対象者をカバー

体重 35 ~ 85kg の対象者に適応



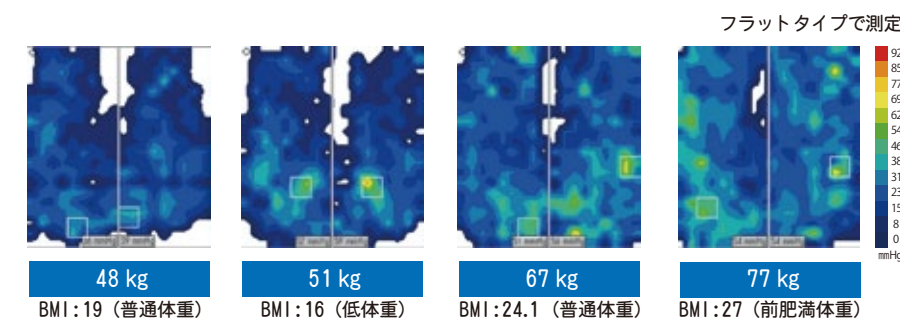


耐久性に優れた防水被膜でお手入れ簡単


クッション本体は耐久性と伸縮性に優れたウレタンフィルムを採用。汚れても清拭で綺麗になるので、お手入れが簡単です。



〈寸法〉

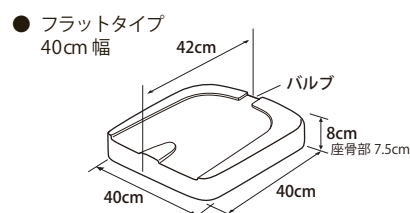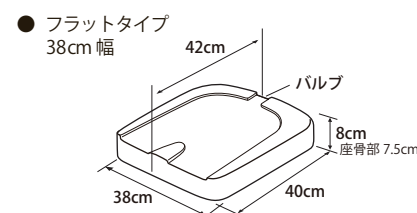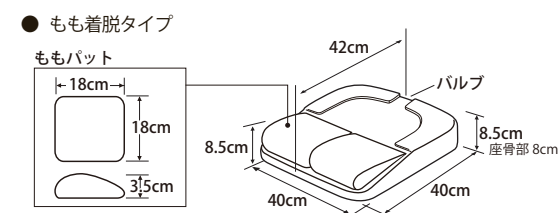

〈カバー〉

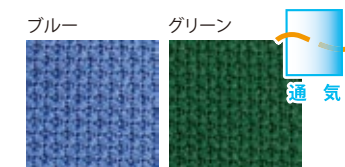

材質 〈カバー〉表生地: ポリエステル、裏生地: ナイロン (ウレタン樹脂塗布)

〈クッション〉ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材

〈バルブ〉硬質PVC、ニトリルゴム

FC-ファイン 背クッション

ジャバラスリットで伸縮自在！





ロングタイプ
¥14,960
(税別 13,600 円)





ショートタイプ
¥9,460
(税別 8,600 円)

このマーク付の
クッションと
併用をおすすめ！

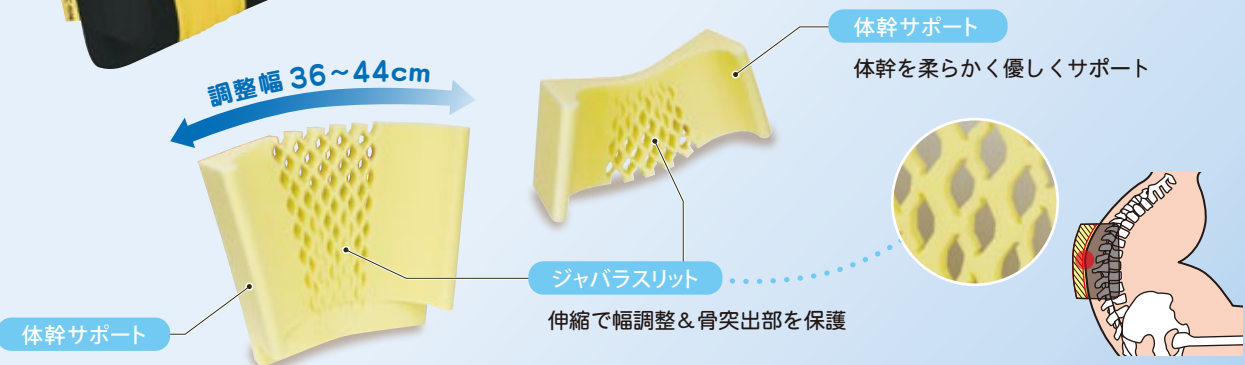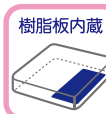

パッと広げて合わせるだけ！
体側を優しくサポート

ジャバラスリットの伸縮でパットの調整が不要、
背中や体側に心地よくフィットします。

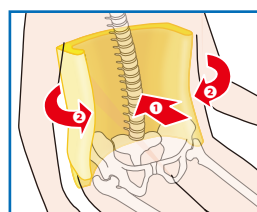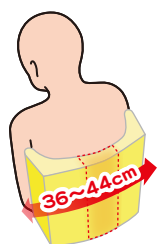

背中に体重が加わる
ことでサポート部が
内側に寄り、優しく
身体にフィットします。

ロングタイプは2Way仕様

身長・体型によって上下を入れ替えて
使用することで、座の奥行調整ができます。



おすすめ対象者



円背

- 背中に骨突出部があり、痛みがある方
- 座位バランスを安定させたい方
- 車いすの奥行を調整したい方
- 食事などに適した前傾姿勢をとりたい方

FC-ファイン 座クッション


ジャバラスリットで面で支えて、点で受け止める！



ハイタイプ
¥9,460
(税別 8,600 円)





ロータイプ
¥9,020
(税別 8,200 円)

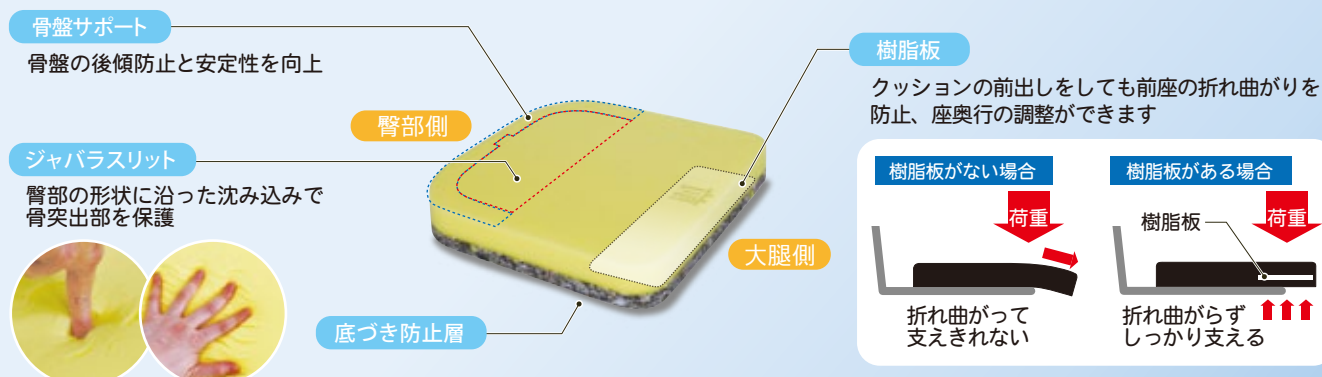


フラットなのに座ると
立体的な形状に変化

ジャバラスリットと骨盤サポートが
臀部全体を立体的にサポート、姿勢
保持と体圧分散性を両立します。

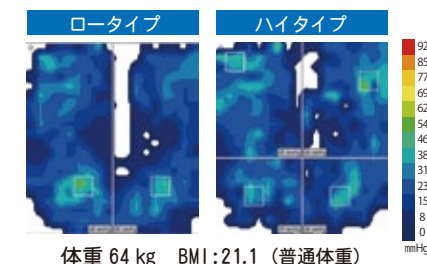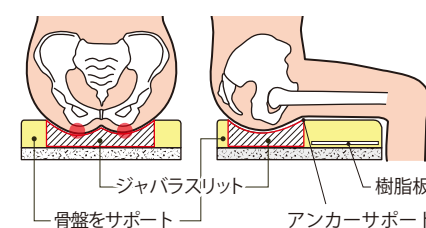

座奥行が足りない時に、クッションの前出しが可能

円背や滑りすわりの方でも、クッションの前出しで座面を長くできます。
樹脂板内蔵で折れ曲がらないので、ゆったり座ることができます。

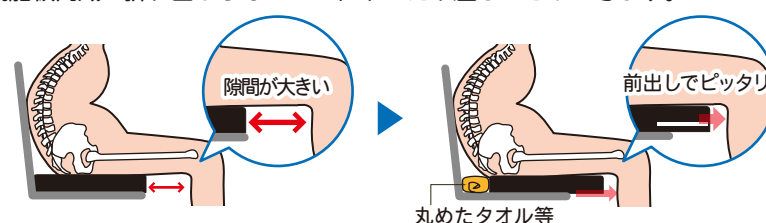


おすすめ対象者




- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 座位バランスを安定させたい方
- 車いすの奥行を調整したい方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

〈寸法〉

● ロングタイプ

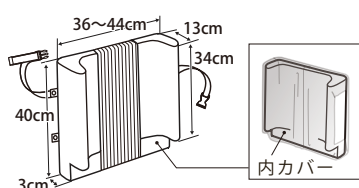

● ショートタイプ

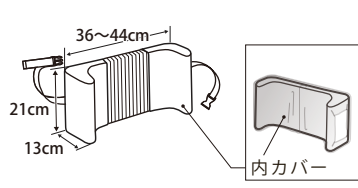


〈カバー〉




材 質 〈カバー〉 ポリエステル 100% 〈クッション〉 ウレタンフォーム 〈内カバー〉 ストックネット

〈寸法〉

● ハイタイプ

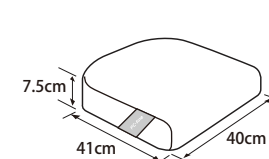

● ロータイプ

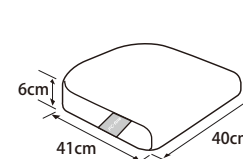

〈カバー〉



材 質 〈防水カバー〉 表材：ポリエステル (裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏面：ナイロン (ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉 ウレタン複合材

FC-フィット(背)

超ロングパットがしっかり届く！




¥16,500
(税別 15,000 円)



超ロングなパットで体幹をしっかりサポート

円背の方など、通常のパットでは体幹に届かない方もしっかりサポート。
3段階の高さ調整と幅の調整で、最適な位置に合わせることができます。

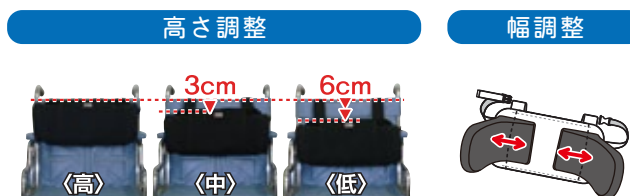

おすすめ対象者



- 円背の方
- 斜めすわりの方
- 前かがみ姿勢の方



FC-フィット(腰)

縦横ラインが骨盤をホールド！



¥8,360
(税別 7,600 円)

このマーク付の
クッションと
併用をおすすめ！

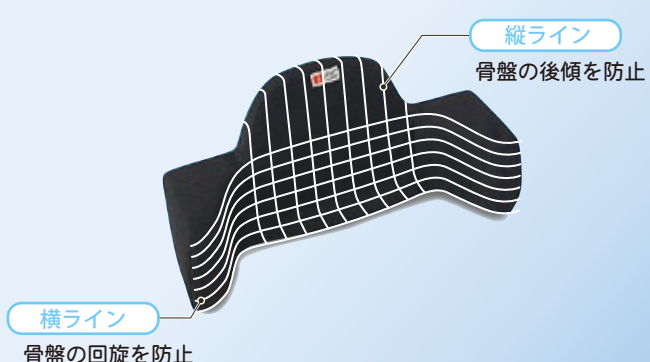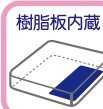

骨盤にフィットする立体フォルム

車いすと身体の間隙を埋めて、骨盤の回旋・後傾の進行を防止。さらに、腰回りをしっかり支えることで、座骨や仙骨にかかる体圧を分散します。



おすすめ対象者




- 骨盤が後傾している方
- 骨盤が回旋している方
- 車いすが大きすぎて姿勢が崩れちゃう方

エルダークッション

立体構造で良姿勢に！




¥11,550
(税別 10,500 円)

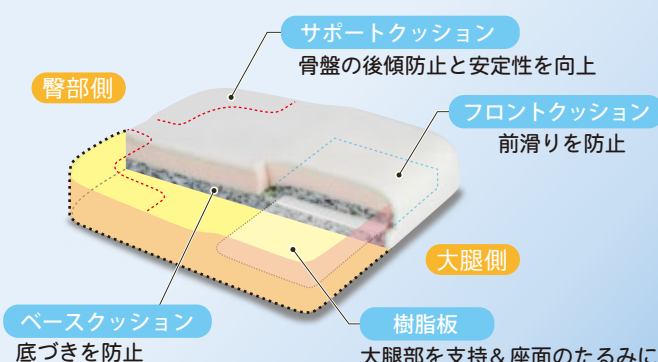

クッションを前出ししても折れ曲がらず大腿部をしっかりサポート

円背や滑りすわりのため、座奥行が足りない方に。クッションを座シートより前に出してもクッションが折れ曲がることなく、座面を広く使えます。

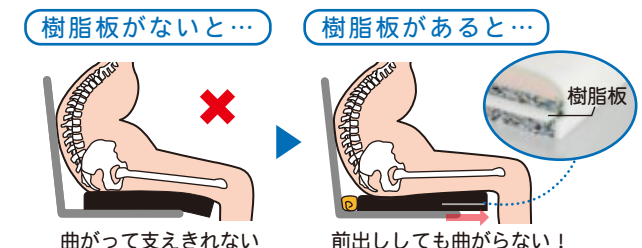

おすすめ対象者




- 前すべりを防止したい方
- 姿勢を安定させたい方
- 長時間座位でおしりが痛い方

ゲルファースト

内蔵ゲルでずれの力を吸収！



防水カバータイプ ¥18,700
(税別 17,000 円)
通気カバータイプ ¥17,600
(税別 16,000 円)

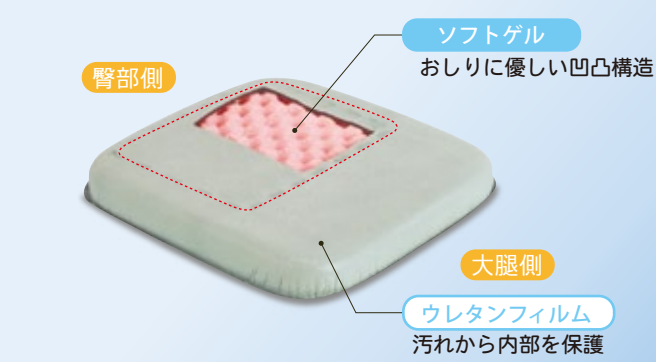

おしりを守るソフトゲル

おしりを支える後方に柔らかいゲルを内蔵。おしりの動きにつれてゲルが動くので、皮膚に働くずれの力を弱めます。



お手入れ簡単


本体はウレタンフィルムで全面が覆われているので汚れても清拭だけでキレイに。




おすすめ対象者




- 前すべりなどでおしりがずれて痛い方
- 薄くて底つきしないクッションが欲しい方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

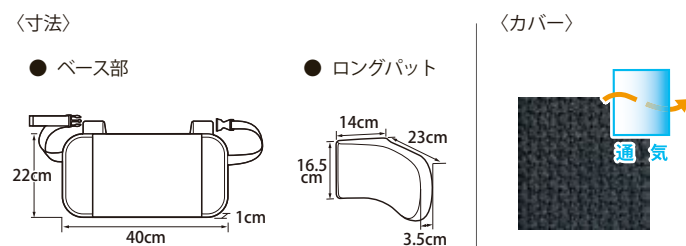


材質 〈ベース部〉 表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布）、ウレタン 〈パットカバー〉 ポリエステル 〈パット〉 エルク・V-Lap®

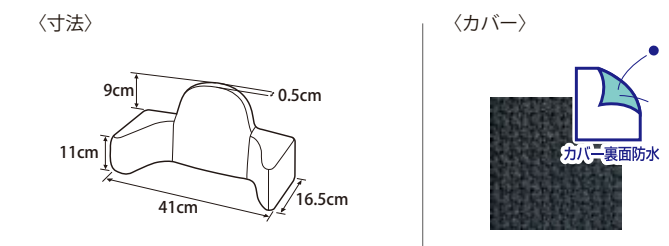

材質 〈防水カバー〉 ポリエステル（裏面ウレタンフィルムラミネート加工）、〈クッション〉 ウレタン複合材

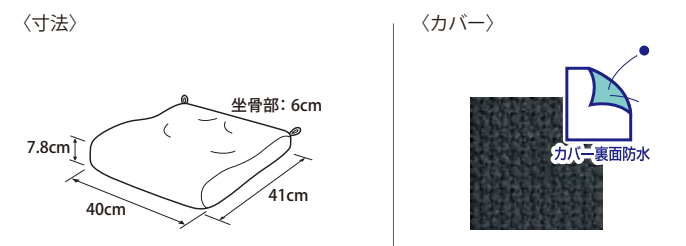

材質 〈防水カバー〉 表生地：ポリエステル（裏面ウレタンフィルムラミネート加工）、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布） 〈クッション〉 ウレタン複合材、ポリエチレン

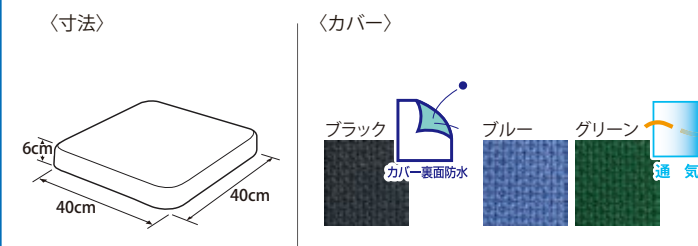

材質 〈防水カバー〉 表生地：ポリエステル（裏面ウレタンフィルムラミネート加工）、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布） 〈通気カバー〉 表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン（ウレタン樹脂塗布） 〈クッション〉 ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材、ウレタンゲル

製品仕様

●FC-コキュール NV

品 名		型 番	色	価 格 (税込)	サイズ (cm)	重 量 (g)	TAIS コード	JAN コード
FC- コキュール NV	もも着脱タイプ	40cm 幅 (通気)	FCNV-M-B FCNV-M-G	ブルー グリーン	¥ 35,200	40×42×8.5 (座骨部:8)	820	00149-000064 4560232693761 4560232693754
	フラットタイプ	40cm 幅 (通気)	FCNV-F-B FCNV-F-G	ブルー グリーン	¥ 30,800	40×42×8 (座骨部:7.5)	790	00149-000065 4560232693792 4560232693891
		38cm 幅 (通気)	FCNV-F38-B FCNV-F38-G	ブルー グリーン	¥ 30,800	38×42×8 (座骨部:7.5)	740	00149-000069 4560232693884
FC- コキュール NV用 替えカバー	もも着脱タイプ	40cm 幅 (通気)	FCNV-M-BC FCNV-M-GC	ブルー グリーン	¥ 4,180	—	—	—
	フラットタイプ	40cm 幅 (通気)	FCNV-F-BC FCNV-F-GC	ブルー グリーン	¥ 4,180	—	—	—
		38cm 幅 (通気)	FCNV-F38-BC FCNV-F38-GC	ブルー グリーン	¥ 4,180	—	—	—

●FC-ファイン

品 名		型 番	価 格 (税込)	サイズ (cm)	重 量 (g)	TAIS コード	JAN コード
FC- ファイン 背クッション	ロングタイプ	FCFN-B40	¥ 14,960	36～44×40×13	520	00149-000057	4560232692412
	ショートタイプ	FCFN-B21	¥ 9,460	36～44×21×13	320	00149-000056	4560232692429
FC- ファイン 背クッション用替えカバー	ロングタイプ	FCFN-B40C	¥ 6,050	—	—	—	—
	ショートタイプ	FCFN-B21C	¥ 4,620	—	—	—	—
FC- ファイン 背クッション ロングタイプ用固定ベルト		—	¥ 880	—	—	—	—
FC- ファイン 座クッション	ハイタイプ	FCFN-S75	¥ 9,460	40×41×7.5	945	00149-000059	4560232692436
	ロータイプ	FCFN-S60	¥ 9,020	40×41×6	795	00149-000058	4560232692443
FC- ファイン 座クッション用替えカバー	ハイタイプ	FCFN-S75C	¥ 4,070	—	—	—	—
	ロータイプ	FCFN-S60C	¥ 4,070	—	—	—	—

●FC-フィット (背)

品 名	価 格 (税込)	サイズ (cm)	重 量 (g)	TAIS コード	JAN コード
FC-フィット (背) (ベース部 + ロングパット 2個)	¥ 16,500	40×22×23	525	00149-000023	4560232693921
ロングパット (2個 1セット)	¥ 10,560	14×16.5×23	180×2	—	4560232693938
ロングパット用 替えカバー	¥ 1,430	—	—	—	—

●FC-フィット (腰)

品 名	価 格 (税込)	サイズ (cm)	重 量 (g)	TAIS コード	JAN コード
FC-フィット (腰)	¥ 8,360	41×16.5×20	450	00149-000022	4560232693945
FC-フィット (腰) 用 替えカバー (防水)	¥ 4,950	—	—	—	—

●エルダークッション

品 名	価 格 (税込)	サイズ (cm)	重 量 (g)	TAIS コード	JAN コード
エルダークッション	¥ 11,550	40×41×7.8 (座骨部:6)	930	00149-000020	4560232693914
エルダークッション用 替えカバー	¥ 4,510	—	—	—	—

●ゲルファースト

品 名		色	価 格 (税込)	サイズ (cm)	重 量 (g)	TAIS コード	JAN コード
ゲルファースト	防水カバータイプ	ブラック	¥ 18,700	40×40×6	950	00149-000021	4560232693877
	通気カバータイプ	ブルー グリーン	¥ 17,600	40×40×6	950	00149-000021	4560232693839 4560232693815
ゲルファースト用 替えカバー	防水カバータイプ	ブラック	¥ 4,510	—		—	—
	通気カバータイプ	ブルー / グリーン	¥ 4,180	—	—	—	—

メンテナンスについて

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している × 不可


種 類	部 品	洗 濯			洗 剤 ・ 薬 剤					消 毒			耐 熱 温 度	取 扱 い 上 の ご 注 意		
		手 洗 い	洗 濯 機	乾 燥 機	中 性 洗 剤	弱 アルカリ性 洗剤	塩 素 系 漂 白 剤	エ タ ノ ール	逆 性 石 鹼 (オスバン 液)	熱 湯 消 毒	オ ゾ ン 消 毒	オ ー ト ク レ ー プ				
FC- コキュール君 NV 	本 体	×			清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				70℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可 (清拭のみ)		
	もも パット	押し洗い ◎		×			×			×	○	×		・面ファスナーで傷つけない よう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥		
	カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○				○	○					75℃ 以下	・脱水後、日陰乾燥	
FC- ファイン 	背	本体	×	×	×			×	清拭のみ ○				70℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可 (清拭のみ)		
		カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	※ ○			○	○					75℃ 以下	※タンブラー乾燥は不可	
	座	本体	×	×	×			×	清拭のみ ○		×	○	×	70℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可 (清拭のみ)	
		カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○			○	○					75℃ 以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥	
FC- フィット (背) 	ベース部		弱 流 ○ ネット使用				×			×			75℃ 以下	・脱水後、日陰乾燥		
	ロング パット	◎	×		○	○	○	○	○	○	○	×			100℃ 以下 30分以内	120℃ 以下 20分以内
	ロング パット カバー		弱 流 ○ ネット使用	○			×			×					75℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可 (清拭のみ)
FC- フィット (腰) 	本 体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○		×	○	×	75℃ 以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○						・水洗い、浸け置き不可 (清拭のみ)	
エルダークッション 	本 体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○		×	○	×	75℃ 以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥	
	防 水 カバー	◎	弱 流 ○ ネット使用	○	○	○		○	○							
ゲルファースト 	本 体	×	×	×	清拭のみ ○	清拭のみ ○		清拭のみ ○	清拭のみ ○				70℃ 以下	・水洗い、浸け置き不可 (清拭のみ)		
	通 気 カバー		弱 流 ○ ネット使用	○			×			×	○	×		75℃ 以下	・脱水後、日陰乾燥	
	防 水 カバー	◎				○	○		○	○						・脱水後、裏返して日陰乾燥

ホームページにて資料の閲覧・ダウンロードができます。
下記の QR コードよりアクセスしてください。


カ タ ロ グ



取扱説明書

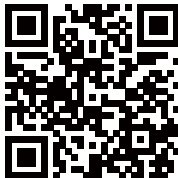

メンテナンス表

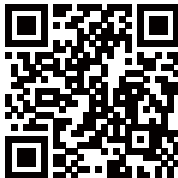

製品動画

