


# 車いすクッション

FC-クッションシリーズ

FC-CUSHION SERIES

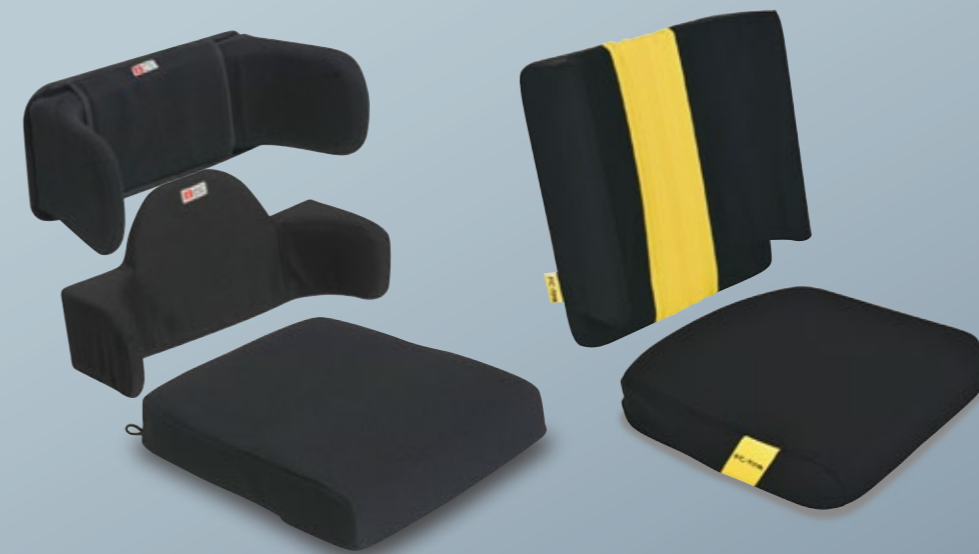

弊社 Web サイトでは、  
ポジショニングや姿勢づくりを  
詳しくご紹介しています

<https://www.nasent.net> ナーセント 検索

使用例の  
動画も配信中!



**アイ・ソネックス** 株式会社

〒702-8004 岡山県岡山市中区江並100-7  
TEL:086-200-1550 FAX:086-200-1553

# FC-CUSHION

## Seating 快適に座る

起きている時間のうち、  
座って活動する時間はとても大切。  
食べたり、くつろいだり、移動したり、  
時には車椅子を足で漕いだり。  
様々な生活シーンで動きやすく、  
快適に座れるようなクッションを  
作りました。



「りはとけあ」とは、わたしたちが、アイ・ソネックスの  
プロダクト全体を通して提案する、新しい介護のカタチです。  
「気持ちよく眠る」、「立ち上がる」、「快適に座る」、  
「美味しく食べる」、「スッキリ出す」という5つの活動が  
プロダクトによってより良く変化することで、生活の  
好循環が回り出す、そんな介護スタイルの提供を  
目指しています。

### 「姿勢保持力」から見た背クッションの選び方

### 「床ずれリスク」から見た 座クッションの選び方

### 座クッション 機能性アイコン

#### ■クッションの形状

**フラットタイプ**

凹凸がないので車いすへの乗り降りがしやすいタイプです。

**コンタータイプ**

臀部に沿う形状で体圧分散性と姿勢保持性を兼ね備えています。

**もも着脱タイプ**

ももパットを取り外すと前座面が低くなり足こぎがしやすくなります。

#### ■クッション底面の形状

**樹脂板内蔵**

**樹脂板内蔵タイプ**

滑りすわりなどで車いす座面が短くなる方に。車いす座面より前出ししても樹脂板によりクッションが変形せず、大腿を支えます。

#### 強

体幹や腰をしっかり支えないと  
座位姿勢が保てない方に

#### FC-フィット(背)



P.7 掲載

通常の背クッションでは支えきれない方でも超ロングタイプのパットがしっかり届いて保持

#### FC-フィット(腰)



P.7 掲載

車いす背シートと骨盤の間の隙間を埋めて骨盤後傾を防止

#### 弱

腰痛などで支えがあると座位が  
楽に続けられる方に



#### FC-ファイン 背クッション ロングタイプ

P.5 掲載

置くだけで体幹や骨盤にフィットするので面倒な背張り調整が不要



#### FC-ファイン 背クッションショートタイプ

P.5 掲載

骨盤サポート付の車いすや食卓椅子などに適合

#### 高

積極的に床ずれを防止したい方に

#### FC-コキュー君NV もも着脱タイプ



P.3 掲載

ももパットを外すとクッションの前座が低くなるので足こぎに最適

#### FC-コキュー君NV フラットタイプ



P.3 掲載

フラットなので乗り降りしやすい

#### 中

座位時間が長くて姿勢が崩れる方に

#### FC-ファイン 座クッション



P.6 掲載

ハイタイプ

ロータイプ

ジャバラスリットの働きで前滑りにくい

#### エルダークッション



P.8 掲載

立体構造が前すべりを防いで良い姿勢に

#### 低

座位の安定と動きやすさの  
両方を求める方に

#### ゲルファースト



P.8 掲載

皮膚への摩擦やずれの力を吸収

置き間違い防止  
「前(ひざ側)」表示タグ付!



## 床ずれ対策にベスト！目玉バルブの自動調圧エアクッション

もも着脱タイプ  
40cm 幅



(防水) **¥37,400**  
(税別 34,000円)

(通気) **¥35,200**  
(税別 32,000円)

床ずれ防止+姿勢保持  
足こぎ対応

フラットタイプ  
38cm 幅  
40cm 幅



(防水) **¥33,000**  
(税別 30,000円)

(通気) **¥30,800**  
(税別 28,000円)

床ずれ防止+姿勢保持  
乗り降りしやすい

### 足こぎ対応！もも着脱タイプ



体圧分散性を高める  
コンター層

エアを吸排気する  
エア層

姿勢を安定させる  
底つき防止層

仙骨を除圧


前滑りを防止

骨盤後傾を防止

ももパット

片側ずつ取り外しが可能  
取り外すと前座部の厚みが3cmに

### 乗り降りしやすい！フラットタイプ

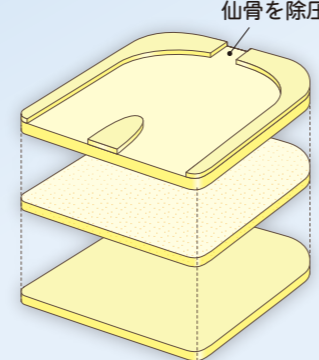

体圧分散性を高める  
コンター層

エアを吸排気する  
エア層

姿勢を安定させる  
底つき防止層

仙骨を除圧

内転防止パッド

両下肢の内転を防止  
自然な座位姿勢に

サイドサポート

両サイドから骨盤を  
安定的に保持

#### おすすめ対象者



- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 姿勢の崩れや前滑りを防止したい方
- 片麻痺で足こぎをされる方
- 股関節を深く屈曲できない方(大腿骨頸部骨折後、関節リウマチなど)

#### おすすめ対象者




- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 失禁や失便が多く、汚れが気になる方
- 長時間車いすに座って過ごされる方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

### 目玉バルブで吸排気を自動コントロール

座ると自動的に空気を排気してお尻の形にフィット、立ち上がると素早く元の形状に復元、座るたびに最適な座り心地を得られます。

体動に合わせてエアを素早く吸排気するので長時間座っても疲れにくいクッションです。

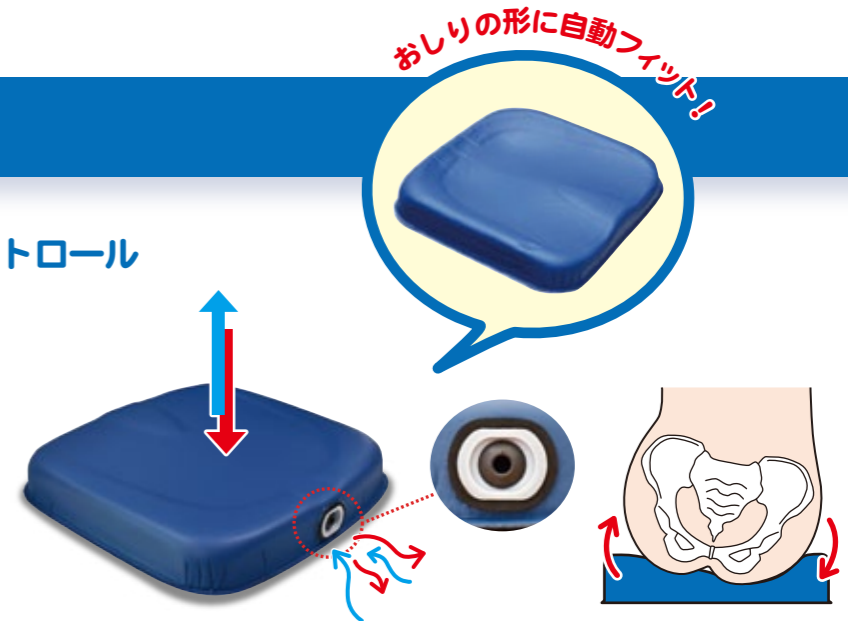

### バルブのリリース機能でどすんと座っても安心


勢いよく座った時にはエアを一気に排出。着座時の衝撃や痛みを緩和し、急激な内圧上昇によるパンクも防ぎます。

▼エアを一気に排出する「リリース機能」




### エアとウレタンのハイブリッド構造、体圧分散+姿勢保持を両立

エアの体圧分散性と、ウレタンの姿勢保持性によって、床ずれを防止しながら座位姿勢の安定性を高めます。

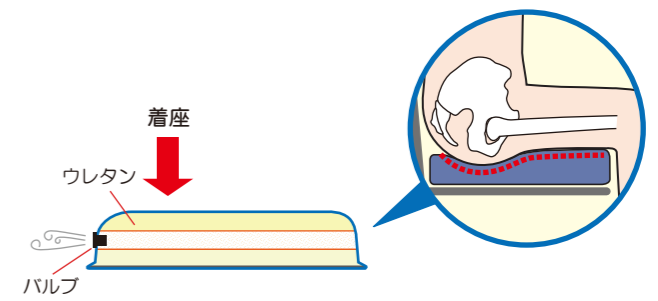

### ひとつのバルブで幅広い対象者をカバー

体重 35 ~ 85kg の対象者に適応

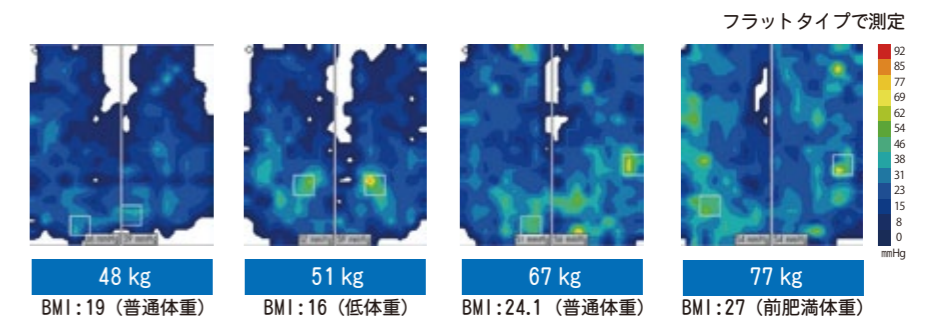


### 耐久性に優れた防水被膜でお手入れ簡単


クッション本体は耐久性と伸縮性に優れたウレタンフィルムを採用。汚れても清拭で綺麗になるので、お手入れが簡単です。



<寸法>

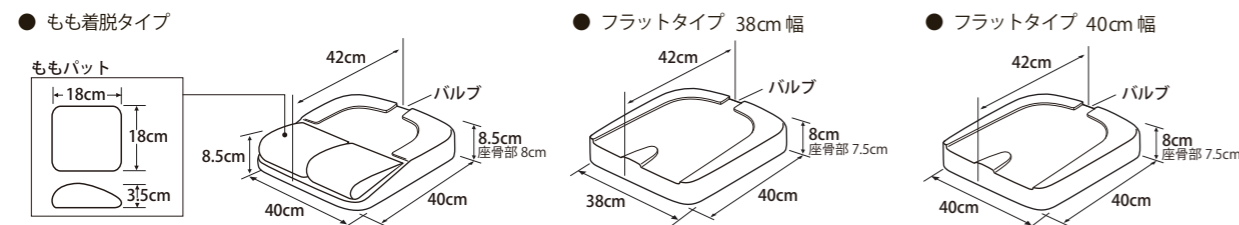

<カバー>

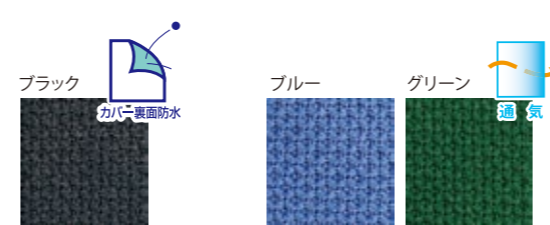

材質 <防水カバー> 表生地: ポリエステル (裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏生地: ナイロン (ウレタン樹脂塗布) <通気カバー> 表生地: ポリエステル、裏生地: ナイロン (ウレタン樹脂塗布)  
<クッション> ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材 <バルブ> 硬質 PVC、ニトリルゴム

# FC-ファイブ 背クッション


ジャバラスリットで伸縮自在！



ロングタイプ  
¥14,960  
(税別 13,600円)




ショートタイプ  
¥9,460  
(税別 8,600円)

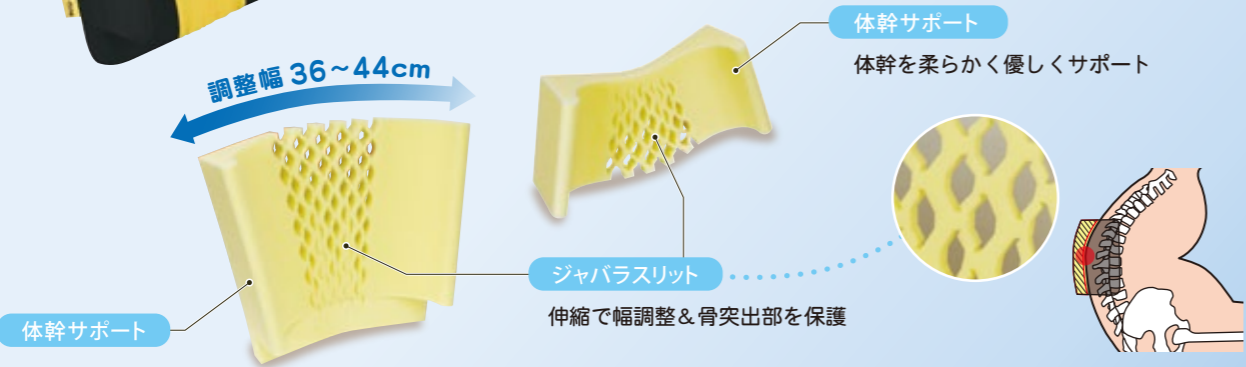

## パッと拡げて合わせるだけ！ 体側を優しくサポート

ジャバラスリットの伸縮でパットの調整が不要、背中や体側に心地よくフィットします。

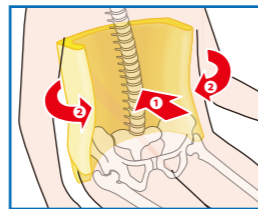

背中に体重が加わることでサポート部が内側に寄り、優しく身体にフィットします。

## ロングタイプは2Way仕様

身長・体型によって上下を入れ替えて使用することで、座の奥行調整ができます。



### おすすめ対象者



円背

- 背中に骨突出部があり、痛みがある方
- 座位バランスを安定させたい方
- 車いすの奥行を調整したい方
- 食事などに適した前傾姿勢をとりたい方

# FC-ファイブ 座クッション


ジャバラスリットで面で支えて、点で受け止める！



ハイタイプ  
¥9,460  
(税別 8,600円)





ロータイプ  
¥9,020  
(税別 8,200円)

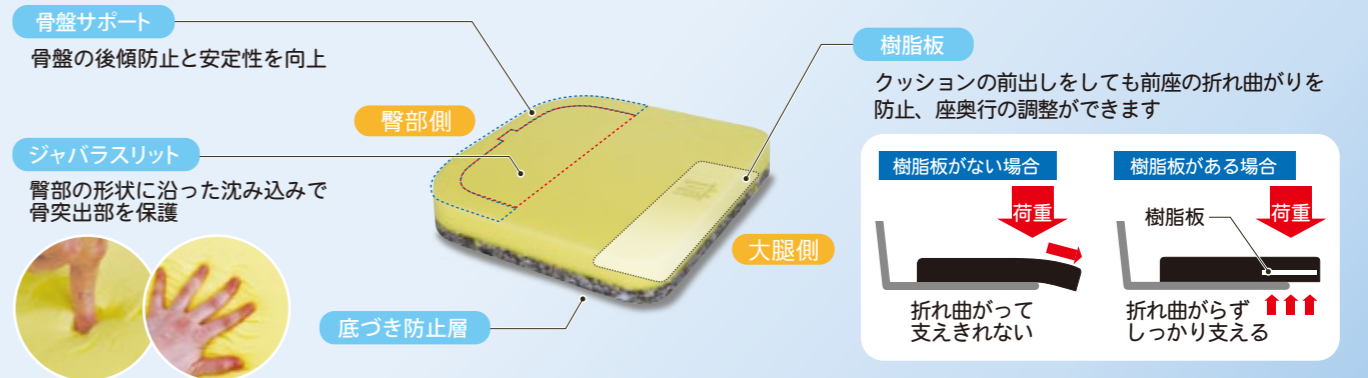


## フラットなのに座ると立体的な形状に変化

ジャバラスリットと骨盤サポートが臀部全体を立体的にサポート、姿勢保持と体圧分散性を両立します。

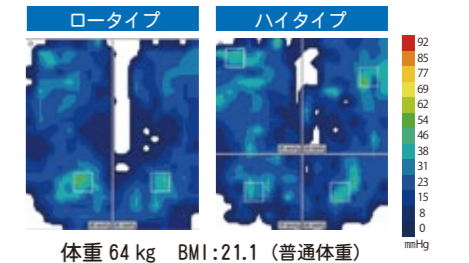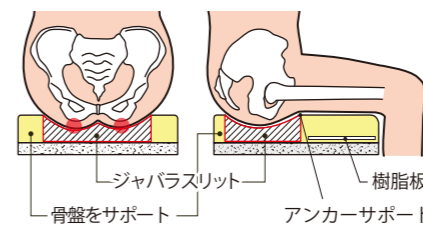


## 座奥行が足りない時に、クッションの前出しが可能

円背や滑りすわりの方でも、クッションの前出しで座面を長くできます。樹脂板内蔵で折れ曲がらないので、ゆったり座ることができます。

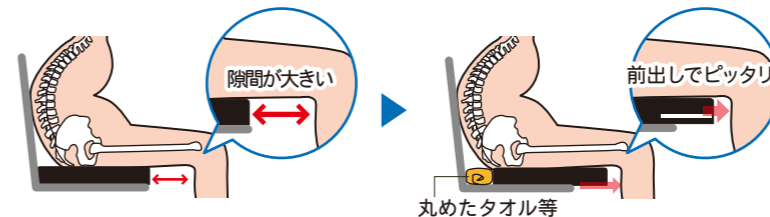


### おすすめ対象者

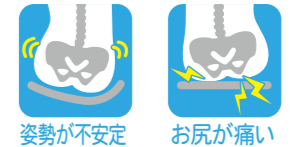


- 座骨や仙骨の床ずれを防止したい方
- 座位バランスを安定させたい方
- 車いすの奥行を調整したい方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

<寸法>


● ロングタイプ

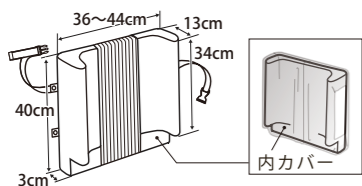

● ショートタイプ

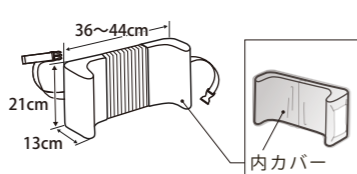


<カバー>

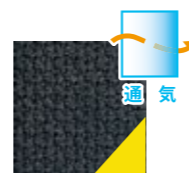


材質 <カバー> ポリエステル 100% <クッション> ウレタンフォーム <内カバー> ストックネット

<寸法>

● ハイタイプ

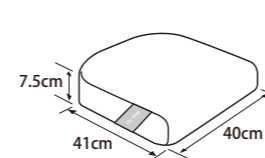

● ロータイプ

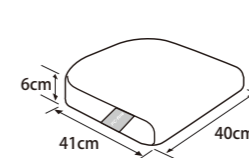

<カバー>



材質 <防水カバー> 表材: ポリエステル (裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏面: ナイロン (ウレタン樹脂塗布) <クッション> ウレタン複合材

# FC-フィット(背)

超ロングパットがしっかり届く！



¥16,500  
(税別 15,000円)





## 超ロングなパットで体幹をしっかりサポート

円背の方など、通常のパットでは体幹に届かない方もしっかりサポート。  
3段階の高さ調整と幅の調整で、最適な位置に合わせることができます。



高さ調整

幅調整

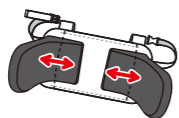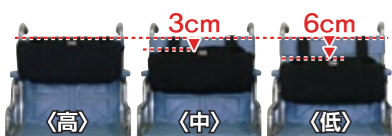

おすすめ対象者



- 円背の方
- 斜めすわりの方
- 前かがみ姿勢の方



# FC-フィット(腰)

縦横ラインが骨盤をホールド！



¥8,360  
(税別 7,600円)

このマーク付のクッションと併用をおすすめ！

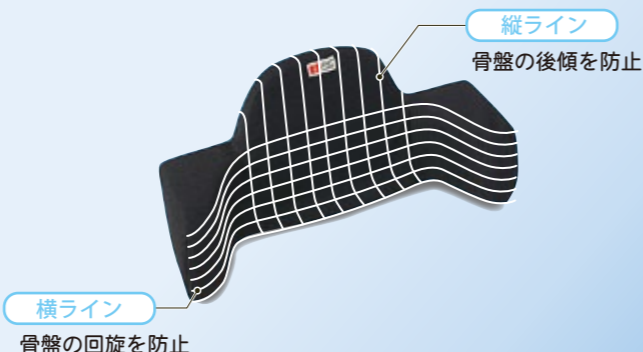
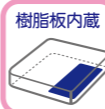


## 骨盤にフィットする立体フォルム

車いすと身体の間隙を埋めて、骨盤の回旋・後傾の進行を防止。さらに、腰回りをしっかり支えることで、座骨や仙骨にかかる体圧を分散します。

骨盤回旋の防止

後傾した骨盤を支持

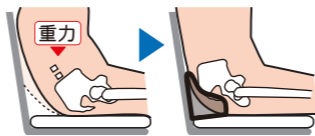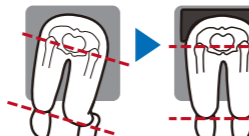

おすすめ対象者



- 骨盤が後傾している方
- 骨盤が回旋している方
- 車いすが大きすぎて姿勢が崩れてしまう方

# エルダークッション



立体構造で良姿勢に！



¥11,550  
(税別 10,500円)



床ずれ防止+姿勢保持

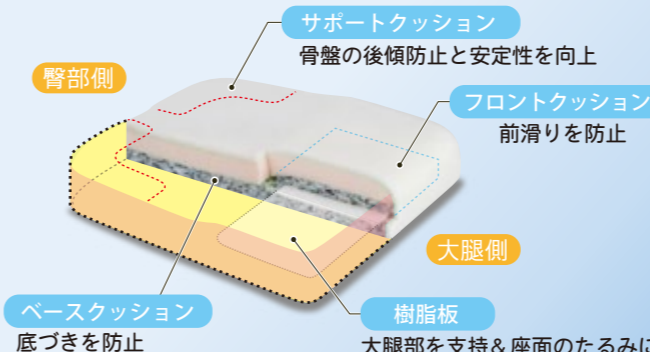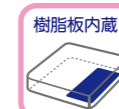

## クッションを前出ししても折れ曲がらず大腿部をしっかりサポート

円背や滑りすわりのため、座奥行が足りない方に。クッションを座シートより前に出してもクッションが折れ曲がることなく、座面を広く使えます。

樹脂板がないと...

樹脂板があると...



曲がって支えきれない

前出ししても曲がらない！

おすすめ対象者



- 前すべりを防止したい方
- 姿勢を安定させたい方
- 長時間座位でおしりが痛い方

# ゲルファースト

内蔵ゲルでずれの力を吸収！



防水カバータイプ ¥18,700  
(税別 17,000円)

通気カバータイプ ¥17,600  
(税別 16,000円)



乗り降りしやすい



## おしりを守るソフトゲル

おしりを支える後方に柔らかいゲルを内蔵。おしりの動きにつれてゲルが動くので、皮膚に働くずれの力を弱めます。



## お手入れ簡単


本体はウレタンフィルムで全面が覆われているので汚れても清拭だけでキレイに。




おすすめ対象者




- 前すべりなどでおしりがずれて痛い方
- 薄くて底づきしないクッションが欲しい方
- 車いすに乗り降りしやすいクッションが欲しい方

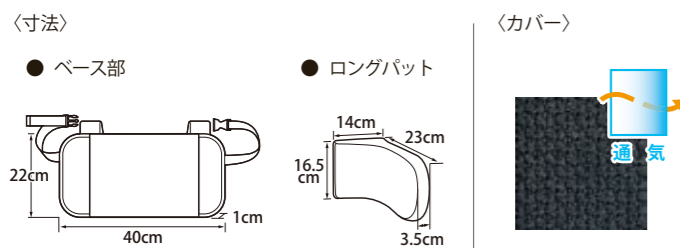


材質 〈ベース部〉表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン(ウレタン樹脂塗布)、ウレタン 〈パットカバー〉ポリエステル 〈パット〉エルク・V-Lap®

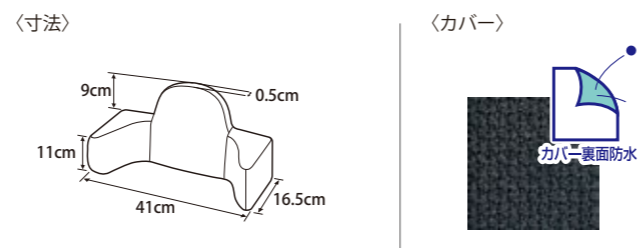

材質 〈防水カバー〉ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工) 〈クッション〉ウレタン複合材

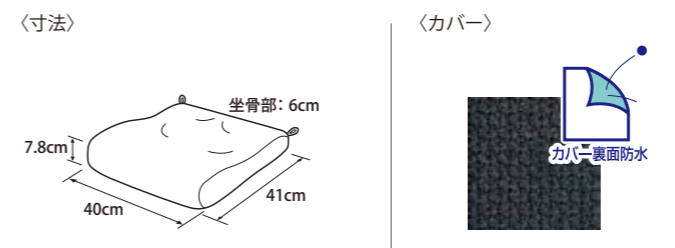

材質 〈防水カバー〉表生地：ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏生地：ナイロン(ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉ウレタン複合材、ポリエチレン

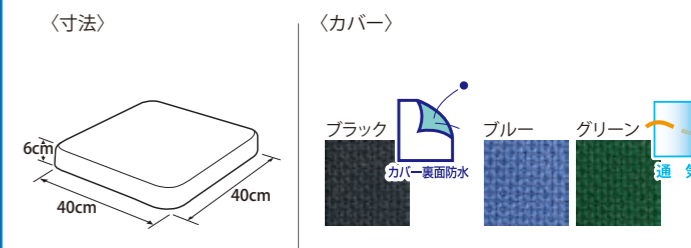

材質 〈防水カバー〉表生地：ポリエステル(裏面ウレタンフィルムラミネート加工)、裏生地：ナイロン(ウレタン樹脂塗布) 〈通気カバー〉表生地：ポリエステル、裏生地：ナイロン(ウレタン樹脂塗布) 〈クッション〉ウレタン樹脂フィルム、ウレタン複合材、ウレタンゲル

## 製品仕様

### ●FC-コキュー君 NV

品名	型番	色	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード	
FC-コキュー君 NV	もも着脱タイプ	40cm幅(防水)	FCNV-M-BK ブラック	¥37,400	40×42×8.5(座骨部:8)	820	00149-000076	4560232693747
		40cm幅(通気)	FCNV-M-B ブルー FCNV-M-G グリーン	¥35,200			00149-000064	4560232693761 4560232693754
	フラットタイプ	40cm幅(防水)	FCNV-F-BK ブラック	¥33,000	40×42×8(座骨部:7.5)	790	00149-000067	4560232693778
		40cm幅(通気)	FCNV-F-B ブルー FCNV-F-G グリーン	¥30,800			00149-000065	4560232693792 4560232693785
		38cm幅(防水)	FCNV-F38-BK ブラック	¥33,000	38×42×8(座骨部:7.5)	740	00149-000068	4560232693808
		38cm幅(通気)	FCNV-F38-B ブルー FCNV-F38-G グリーン	¥30,800			00149-000069	4560232693891 4560232693884

### ●FC-ファイン

品名	型番	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード	
FC-ファイン 背クッション	ロングタイプ	FCFN-B40	¥14,960	36~44×40×13	520	00149-000057	4560232692412
	ショートタイプ	FCFN-B21	¥9,460	36~44×21×13	320	00149-000056	4560232692429
FC-ファイン 背クッション用替えカバー	ロングタイプ	FCFN-B40C	¥6,050	—	—	—	—
	ショートタイプ	FCFN-B21C	¥4,620	—	—	—	—
FC-ファイン 背クッション ロングタイプ用固定ベルト	—	¥880	—	—	—	—	
FC-ファイン 座クッション	ハイタイプ	FCFN-S75	¥9,460	40×41×7.5	945	00149-000059	4560232692436
	ロータイプ	FCFN-S60	¥9,020	40×41×6	795	00149-000058	4560232692443
FC-ファイン 座クッション用替えカバー	ハイタイプ	FCFN-S75C	¥4,070	—	—	—	—
	ロータイプ	FCFN-S60C	¥4,070	—	—	—	—

### ●FC-フィット(背)

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード
FC-フィット(背) (ベース部 + ロングパット 2個)	¥16,500	40×22×23	525	00149-000023	4560232693921
ロングパット (2個1セット)	¥10,560	14×16.5×23	180×2	—	4560232693938
ロングパット用 替えカバー	¥1,430	—	—	—	—

### ●FC-フィット(腰)

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード
FC-フィット(腰)	¥8,360	41×16.5×20	450	00149-000022	4560232693945
FC-フィット(腰) 用 替えカバー (防水)	¥4,950	—	—	—	—

### ●エルダークッション

品名	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード
エルダークッション	¥11,550	40×41×7.8(座骨部:6)	930	00149-000020	4560232693914
エルダークッション用 替えカバー	¥4,510	—	—	—	—

### ●ゲルファースト

品名	色	価格(税込)	サイズ(cm)	重量(g)	TAISコード	JANコード	
ゲルファースト	防水カバータイプ	ブラック	¥18,700	40×40×6	950	00149-000021	4560232693877
	通気カバータイプ	ブルー グリーン	¥17,600	40×40×6	950	00149-000021	4560232693839 4560232693815
ゲルファースト用 替えカバー	防水カバータイプ	ブラック	¥4,510	—	—	—	—
	通気カバータイプ	ブルー/グリーン	¥4,180	—	—	—	—

## メンテナンスについて

【表示内容について】 ◎ 最も適している ○ 適している × 不可

種類	部品	洗濯			洗剤・薬剤				消毒			耐熱温度	取扱い上のご注意	
		手洗い	洗濯機	乾燥機	中性洗剤	弱アルカリ性洗剤	塩素系漂白剤	エタノール	逆性石鹼 (オスバン液)	熱湯消毒	オゾン消毒			オートクレーブ
FC-コキュー君 NV 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可(清拭のみ)
	ももパット	◎	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・面ファスナーで傷つけないよう個々に手洗い ・脱水後、日陰乾燥
	防水カバー	◎	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、日陰乾燥
	通気カバー	◎	○	○	○	○	○	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
FC-ファイン 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可(清拭のみ)
	背カバー	◎	○	※	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	※タンブラー乾燥は不可
	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可(清拭のみ)
	座カバー	◎	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
FC-フィット(背) 	ベース部	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可(清拭のみ)
	ロングパット	◎	×	×	○	○	○	○	○	○	×	×	100℃以下 30分以内	・脱水後、日陰乾燥
	ロングパットカバー	◎	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
FC-フィット(腰) 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可(清拭のみ)
	カバー	◎	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
エルダークッション 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・水洗い、浸け置き不可(清拭のみ)
	防水カバー	◎	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
ゲルファースト 	本体	×	×	×	○	○	×	○	○	×	○	×	70℃以下	・水洗い、浸け置き不可(清拭のみ)
	防水カバー	◎	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、裏返して日陰乾燥
	通気カバー	◎	○	○	○	○	×	○	○	×	○	×	75℃以下	・脱水後、日陰乾燥

ホームページにて資料の閲覧・ダウンロードができます。  
下記のQRコードよりアクセスしてください。

カタログ



取扱説明書



メンテナンス表



製品動画

